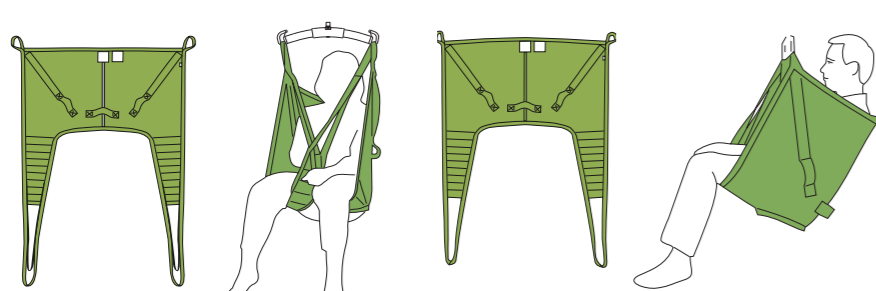
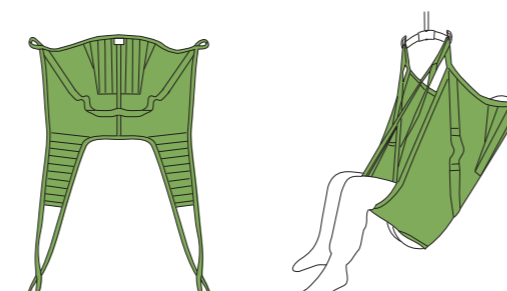
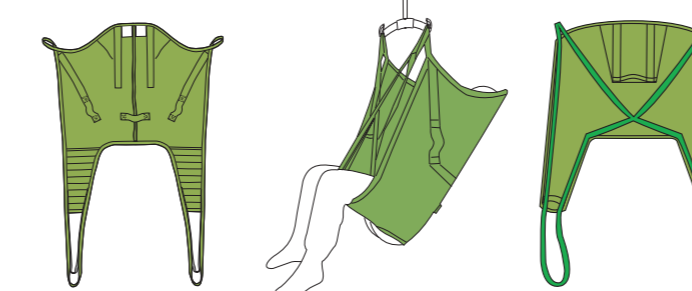
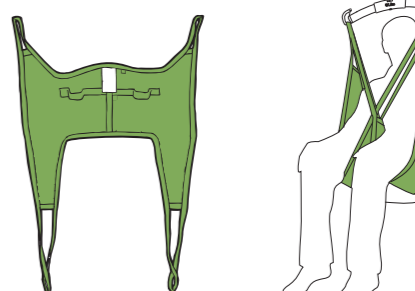


Hebegurte für alle Anforderungen

Basismodelle für sicheres und einfaches Heben

 <p>UniversalSling™, Modell 000 Universal HighLevel Sling™, Modell 002</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein ideales Basismodell, das sich für die meisten Patienten/Pflegebedürftigen eignet • Stützt den gesamten Rücken • Die Arme des Patienten/Pflegebedürftigen befinden sich innerhalb des Hebegurtes • Das Modell 000 unterstützt eine aufrechte Sitzposition • Das Modell 002 ermöglicht eine höhere Hebehöhe beim Hebevorgang (im Vergleich zu Modell 000) <p>Größe: S, MS, M, L, XL Material: Polyester, Polyesternetz, kunststoffbeschichtetes Netz</p>	 <p>Soft Original HighBack Sling™, Modell 26</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für allgemeine Hebesituationen • Für Hebevorgänge aus liegender Position geeignet • Optimierte Passform und Komfort • Stützt zusätzlich den Kopf • Ermöglicht eine halb zurückgelehnte Sitzposition <p>Größe: XS, S, MS, M, L, XL, XXL Material: Polyester, Polyestergewirk</p>	 <p>Original HighBack Sling™, Modell 200/210 Solo HighBack Sling™, Modell 25</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für allgemeine Hebesituationen • Für Hebevorgänge aus liegender Position geeignet • Stützt den gesamten Rücken und den Kopf • Ermöglicht eine halb zurückgelehnte Sitzposition • Das Modell 25 ist für den kurzfristigen Einmalgebrauch bestimmt <p>Größe: XS, S, MS, M, L, XL, XXL Material: Polyesternetz, kunststoffbeschichtetes Netz, Polyester, kunststoffbeschichteter Stoff*, Vliesmaterial** <i>* nur für Modell 200 erhältlich ** nur für Modell 25 erhältlich</i></p>	 <p>OriginalSling™, Modell 10/11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht höhere Beteiligung des Patienten/Pflegebedürftigen • Ideal zum Heben aus sitzender oder halb sitzender Position • Stützt den Rücken bis zu den Schulterblättern • Die Arme des Patienten/Pflegebedürftigen können sich innerhalb oder außerhalb des Hebegurtes befinden (nur bei den Größen MS, M, L und XL) • Einfache Handhabung <p>Größe: XS, S, MS, M, L, XL Material: Polyester, Polyesternetz, kunststoffbeschichtetes Netz, Polyestergewirk</p>
--	--	---	--

Modelle für individuelle Anforderungen

 <p>ComfortSling Plus™, Modell 300/310 ComfortSling Plus High™, Modell 350/360</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für Beinamputierte und/oder Patienten/Pflegebedürftige mit Gelenkschmerzen • Hebegurt wird bei der Nutzung unter dem Patienten/Pflegebedürftigen positioniert • Ermöglicht in Kombination mit dem Vierpunkt-Hebebügel einen offenen Winkel an den Hüften • Stützt zusätzlich den Kopf (Modell 350/360) • Die Modelle 310/360 verfügen über eine Öffnung, um Toilettengänge zu ermöglichen <p>Größe: M, L, XL Material: Polyesternetz, kunststoffbeschichtetes Netz</p>	 <p>AmputeeSling™, Modell 70 Amputee HighBack Sling™, Modell 75</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Patienten/Pflegebedürftige mit Amputation eines oder beider Oberschenkel • Ideal für Patienten/Pflegebedürftige, die Schwierigkeiten dabei haben, in anderen Hebegurtmodellen sitzenzubleiben • Stützt den gesamten Rücken und den Kopf (Modell 75) • Ermöglicht eine halb zurückgelehnte Sitzposition <p>Größe: S, M, L, XL Material: Polyester, Polyesternetz</p>	 <p>SilhouetteSling™, Modell 22</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein elastischer Hebegurt aus Netzgewebe zum Heben und Verbleiben in anatomisch geformten Sitzschalen; ideal für Patienten/Pflegebedürftige mit Behinderung • Der Hebegurt kann nach dem Hebevorgang im Sitz verbleiben • Stützt den gesamten Rücken und den Kopf • Die Arme des Patienten/Pflegebedürftigen können sich innerhalb oder außerhalb des Hebegurtes befinden <p>Größe: XS, S, M, L Material: Polyesternetz</p>	 <p>UltraSling™, Modell 06</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für übergewichtige Patienten/Pflegebedürftige • Bietet zusätzlichen Raum für Hautfalten und Abdomen • Kann zum Heben von Patienten/Pflegebedürftigen auf die/von der Toilette verwendet werden • Max. Tragfähigkeit 500 kg <p>Größe: kurz, normal, lang Material: Polyester, Polyesternetz</p>
---	--	--	---

Stehen+Gehen=Mobilisieren

 <p>MasterVest™, Modell 60</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Patienten/Pflegebedürftige, die teilweise Gewicht tragen können • Bietet erhöhte Sicherheit beim Aufstehen, Stehen, Gehen und bei Gleichgewichtsübungen • Ermöglicht natürliche Bewegungsabläufe • Ideal zum Heben auf die/von der Toilette, da der Unterkörper frei zugänglich bleibt • Kann in Verbindung mit Beingurten verwendet werden <p>Größe: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL Material: Polyester, kunststoffbeschichtetes Netz, Polyestergewirk</p>	 <p>MasterVest™, Verschluss an der Vorderseite, Modell 64</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bietet denselben Anlegebereich wie die MasterVest • Die vorn einstellbaren Verschlüsse im Brust-/Bauchbereich bieten größere Vielseitigkeit für unabhängige Transfers • Beingurt-Zubehör kann für ausgewählte Patienten/Pflegebedürftige verwendet werden <p>Größe: XS, S, M, L, XL, XXL Material: Polyester, kunststoffbeschichtetes Netz, Polyestergewirk</p>	 <p>LiftPants™, Modell 92 Ultra LiftPants™, Modell 920</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für Patienten/Pflegebedürftige, die allein stehen können • Bietet erhöhte Sicherheit beim Aufstehen, Stehen, Gehen und bei Gleichgewichtsübungen • Ermöglicht natürliche Bewegungsabläufe • Ultra LiftPants, Modell 920, ideal für Gehübungen übergewichtiger Patienten/Pflegebedürftiger <p>Größe: XS, S, M, L, XL, XXL*, XXXL* Material: Polyesternetz, Polyestergewirk <i>* nur für Modell 920 erhältlich</i></p>	 <p>Vest for StandingShell™, Modell 67</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Heben des Patienten/Pflegebedürftigen aus einer liegenden in eine stehende Position • Ideal geeignet für die Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen • Inklusive Beingurte • Die Weste übt keinen zusätzlichen Druck auf die Stehsole aus <p>Größe: XXS, XS, S, M, L Material: Polyester, Polyestergewirk</p>
---	---	---	---

Toilette/Hygiene

 <p>HygieneSling™, Modell 40 HygieneSling™ mit Gürtel, Modell 41</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Patienten/Pflegebedürftige mit guter Rumpfstabilität • Einfache Anwendung • Ermöglicht das An-/Ausziehen während des Hebens auf die/von der Toilette • Die Arme des Patienten/Pflegebedürftigen befinden sich außerhalb des Hebegurtes • Zur zusätzlichen Absicherung ist Modell 41 mit einem Sicherheitsgürtel ausgestattet <p>Größe: XS, S, M, L, XL Material: Polyester, Polyestergewirk</p>	 <p>HygieneSling mit SafetyBelt™, Modell 45 Hygiene SafetySling™, Modell 46</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit einem Sicherheitsgürtel ausgestattet; ideal für Patienten/Pflegebedürftige mit geringer Stabilität • Ermöglicht das An-/Ausziehen während des Hebens auf die/von der Toilette • Während der Nutzung kann sich ein Arm des Patienten/Pflegebedürftigen innerhalb des Hebegurtes befinden • Modell 46 verfügt über eine Rückenstütze für zusätzlichen Komfort <p>Größe: XS, S, M, L, XL Material: Polyester, Polyestergewirk</p>	 <p>HygieneVest™, Modell 50</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Patienten/Pflegebedürftige mit niedrigem/hohem Muskeltonus und/oder für Spastiker geeignet • Ermöglicht das An-/Ausziehen während des Hebens auf die/von der Toilette • Stützt und hebt den Oberkörperbereich • Bietet erhöhte Sicherheit beim Heben auf die/von der Toilette • Aufrechte Sitzposition <p>Größe: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Material: Polyester, Polyestergewirk</p>	 <p>HygieneVest HighBack™, Modell 55</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal für Patienten/Pflegebedürftige mit Spastik • Ermöglicht das An-/Ausziehen während des Hebens auf die/von der Toilette • Stützt den gesamten Rücken und den Kopf • Bietet erhöhte Sicherheit beim Heben auf die/von der Toilette • Stützt und hebt den Oberkörperbereich <p>Größe: XXS, XS, S, M, L, XL Material: Polyester, Polyestergewirk</p>
---	---	---	--