

The logo for QUICKIE, featuring a stylized orange swoosh above the word "QUICKIE" in a bold, sans-serif font. Below it, the tagline "Live without limits." is written in a smaller, lighter font.

QUICKIE®  
Live without limits.




The logo for hula, featuring the word "hula" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "h" is stylized with an orange swoosh that loops around it. The logo is set against a dark, oval background.

hula



# Hula

Der flexible und drehfreudige  
Elektro-Rollstuhl

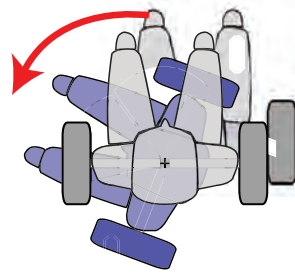

## Kompakt im Innenbereich

- Der Quickie Hula dreht dank **Mittelrad-Antrieb** praktisch auf der Stelle und erleichtert dadurch das Manövrieren in engen Räumen.
- Die **schmale Breite** von lediglich 63 cm ermöglicht ein einfaches Durchfahren von Engstellen (z.B. Türen, Fahrstühle etc.)
- Eine **sehr niedrige Sitzhöhe** ist ideal, um z.B. an Tische heranzufahren oder Transfers zu vereinfachen. Die Sitzhöhe ist von 45 - 47 cm anpassbar.


## Leistungsstark im Aussenbereich

- Auch im Aussenbereich zeigen sich die Vorteile des Quickie Hula **Mittelrad-Antriebs**: das zentrale Antriebsrad erhöht Traktion und Stabilität - und dies auch in schwierigem Gelände.
- Kantensteigfähigkeit bis zu 5 cm und dynamische Stabilität bis 6° - das **einzigartige Federungssystem** des Quickie Hula ist ideal zur Verwendung im Garten oder auf kurzen Ausflügen ausser Haus.
- **Crash getestet**: Der Quickie Hula erfüllt die ISO-Norm 7176-19 vollumfänglich.



## Individuell einstellbares Sitzsystem

Der Quickie Hula ist mit demselben Sitzsystem ausgerüstet wie der Salsa und kann Ihrer individuellen Grösse angepasst werden. Wählen Sie aus einer breiten Palette an Optionen Ihre Favoriten, um Ihren Komfort zu erhöhen oder klinische Anforderungen zu erfüllen. Der Hula kann Ihren Bedürfnissen entsprechend adaptiert werden - heute wie auch in Zukunft.

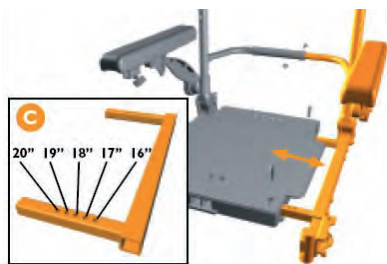

- Sitzbreite einstellbar von 41 bis 51 cm
- Sitztiefe einstellbar von 41 bis 51 cm
- Sitzhöhe 41.5 bis 51 cm
- Sitzneigung 0°, 3° oder 6°
- Rückenwinkel -4° bis 12°




## Eine umfassende Standard-Ausrüstung

- Rückenbespannung anpassbar
- Zentral montierte Fussstütze
- Armauflage hochklappbar
- 10" Antriebsrad
- 6" Lenkrad vorne/hinten
- 36 Ah Batterien
- Federung
- VR2 Motorsteuerung



Rückenbespannung  
anpassbar

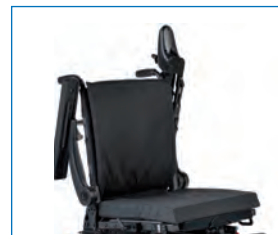

Armauflage  
hochklappbar



Zentral montierte Fuss-  
stütze, hochklappbar

## Hula - der Flexible...

Neben einer umfassenden Standard-Ausrüstung glänzt der Hula auch mit seiner Optionenvielfalt. Mehr Komfort? Entscheiden Sie sich für die JAY Comfort Linie.

Alle Optionen des Hula sind modular, können also einfach angebracht & rasch wieder entfernt werden (auch nachträglich). Hula - Flexibilität pur!



Erhältlich mit der ge-  
samten JAY Comfort Linie  
(Rücken & Kissen)



JAY Comfort Rücken



# Hula

Der flexible und drehfreudige  
Elektro-Rollstuhl



## Technische Daten

Sitzbreite:	41, 43, 46, 48, 51 cm (anpassbar von 41 bis 51 cm)
Sitztiefe:	41, 43, 46, 48, 51 cm (anpassbar von 41 bis 51 cm)
Sitzneigung:	Anpassbar 0°, 3°, 6°
Sitzhöhe:	45 cm / 47 cm (mit 3° Sitzneigung)
Rückenwinkel:	Anpassbar -4° bis 12°
Rückenhöhe:	Anpassbar 46, 48 und 51 cm (Rückenbespannung), 57 cm beim Comfort Rücken
Rückenbreite:	Anpassbar von 41 bis 51 cm
Unterschenkellänge:	34 bis 50 cm
Fussstützen:	90° zentral montiert fix, 80° Swing-Away
Armlehnenhöhe:	Anpassbar von 22 bis 31 cm
Armlehntiefe:	Anpassbar von 31 bis 41 cm

## Spezifikationen

Gesamtbreite:	63 cm
Gesamtlänge (inkl. Fussstützen):	97 cm - 105 cm
Gewicht in der minimalsten Konfiguration:	82 kg
Wendekreis:	115 cm
Batterien:	36 Ah
Max. Reichweite:	18 km
Geschwindigkeit:	6 km/h
Max. Kantensteigfähigkeit:	bis 5 cm
Max. Zuladung:	136 kg
Max. Steigfähigkeit:	6°
Bodenfreiheit:	5 cm
ISO-Norm 7176-19 vollumfänglich erfüllt:	Ja
Garantie:	2 Jahre (es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Informieren Sie sich noch heute!  
Besuchen Sie [www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch) für weitere Informationen.



### Facebook mit QUICKIE

Bleiben Sie Up-to-date mit den aktuellsten Informationen zum Quickie Hula und anderen Produkten von Sunrise Medical Schweiz über unsere Facebook-Seite:

[www.sopur.me](http://www.sopur.me)



### Sunrise Medical AG

Lückhalde 14  
CH-3074 Muri/Bern  
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848  
[info@sunrisemedical.ch](mailto:info@sunrisemedical.ch)  
[www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch)